





Oclusores de CIV Muscular Amplatzer™

TERAPIAS DE STRUCTURAL HEART

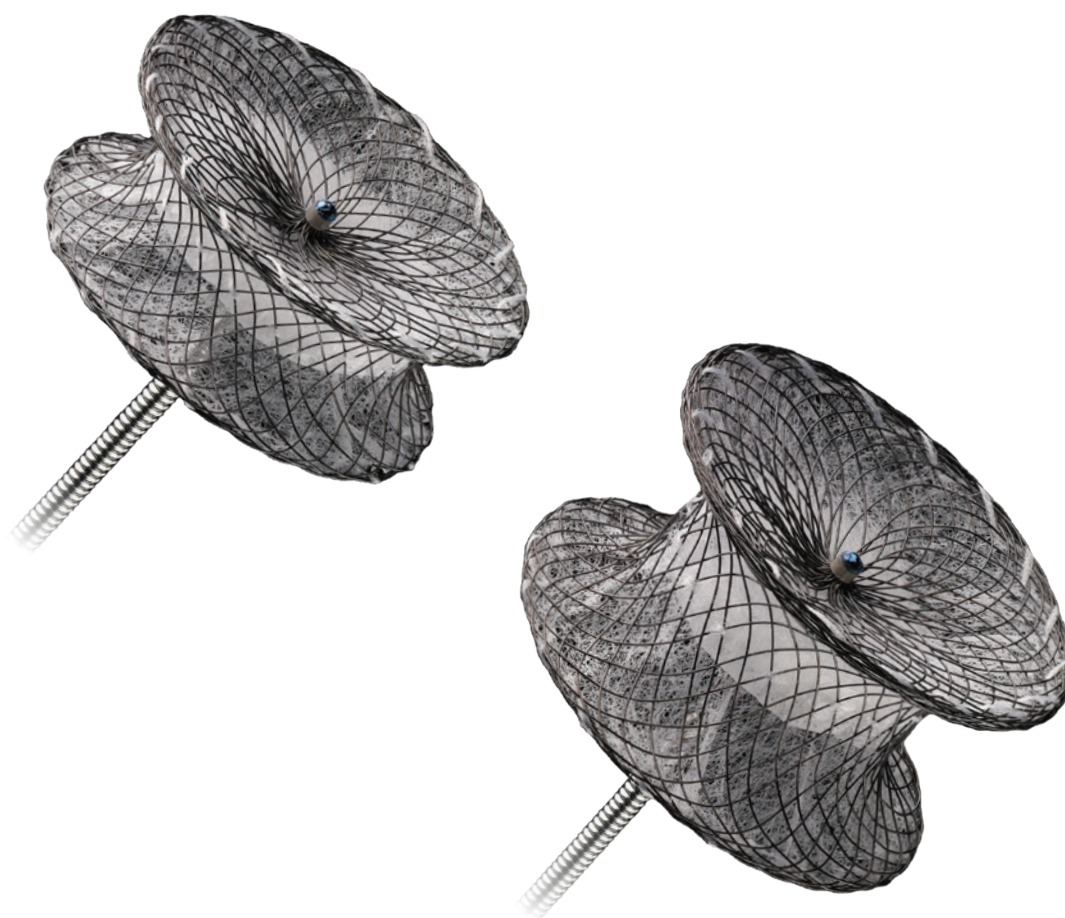

La respuesta innovadora al cierre de las comunicaciones interventriculares musculares

El Oclisor de CIV Muscular Amplatzer™ y el Oclisor de CIV Muscular PI Amplatzer™ son dispositivos de doble disco autoexpandibles hechos de una malla de alambres de nitinol. Los dos discos de estos dispositivos están unidos por una cintura conectora que corresponde con el tamaño de la comunicación interventricular (CIV).

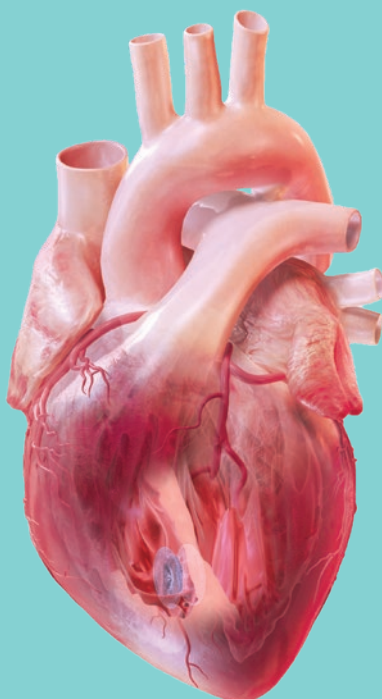

Cierre de una CIV muscular con el Oclisor de CIV Muscular Amplatzer™.

Comunicaciones interventriculares

Las comunicaciones interventriculares son los defectos cardíacos congénitos más frecuentes.¹ Un subtipo de estos defectos es la comunicación interventricular muscular. Si no se trata, puede provocar hipertensión pulmonar y/o insuficiencia cardíaca congestiva.² El Oclusor de CIV Muscular Amplatzer™ y el Oclusor de CIV Muscular PI Amplatzer™ han sido específicamente diseñados para cerrar este tipo de defecto.

DISEÑADOS PARA BRINDAR UNA OCLUSIÓN COMPLETA

- Cintura del dispositivo:** Centra y llena el defecto
- Material de poliéster:** Promueve la oclusión y el crecimiento de tejido hacia dentro

ESPECÍFICAMENTE DISEÑADOS PARA EL CIERRE DE LA CIV MUSCULAR

Algunas personas nacen con comunicaciones interventriculares complejas y padecen los efectos secundarios de esta afección que incluyen shunt izquierda a derecha de gran volumen, hipertensión pulmonar y/o síntomas clínicos de insuficiencia cardíaca congestiva. El Oclusor de CIV Muscular Amplatzer está indicado para el cierre de estas comunicaciones interventriculares (CIV) complejas en pacientes que son considerados de alto riesgo para la reparación quirúrgica estándar.

Longitud de cintura de 7 mm

El Oclusor de CIV Muscular Amplatzer ha sido desarrollado para adaptarse al grosor de la pared septal ventricular muscular.

FLEXIBILIDAD EN EL PROCEDIMIENTO

- Diseño simétrico:** Permite la introducción femoral o arterial
- Colocación precisa:** A través de la capacidad del dispositivo para ser recuperado y vuelto a desplegar

ESPECÍFICAMENTE DISEÑADOS PARA PACIENTES QUE HAN SUFRIDO UN INFARTO DE MIOCARDIO

Algunos pacientes sufren una CIV aguda provocada por la ruptura de la pared septal luego de un infarto de miocardio.

Longitud de cintura de 10 mm

El Oclusor de CIV Muscular PI Amplatzer ha sido diseñado para adaptarse al tejido muscular dañado de la pared septal de pacientes que han sufrido un infarto de miocardio.

Información para pedidos

OCCLUSOR DE CIV MUSCULAR AMPLATZER™

CÓDIGO/REFERENCIA	TAMAÑO DE DISP./DIÁM. DE CINTURA (mm)	DIÁMETRO DE DISCO (mm)	LONGITUD DE CINTURA (mm)
9-VSD-MUSC-004	4	9	7
9-VSD-MUSC-006	6	14	7
9-VSD-MUSC-008	8	16	7
9-VSD-MUSC-010	10	18	7
9-VSD-MUSC-012	12	20	7
9-VSD-MUSC-014	14	22	7
9-VSD-MUSC-016	16	24	7
9-VSD-MUSC-018	18	26	7

OCCLUSOR DE CIV MUSCULAR PI AMPLATZER™

CÓDIGO/REFERENCIA	TAMAÑO DE DISP./DIÁM. DE CINTURA (mm)	DIÁMETRO DE DISCO (mm)	LONGITUD DE CINTURA (mm)
9-VSDMUSCPI-016	16	26	10
9-VSDMUSCPI-018	18	28	10
9-VSDMUSCPI-020	20	30	10
9-VSDMUSCPI-022	22	32	10
9-VSDMUSCPI-024	24	34	10

La información contenida en este documento es SOLO para DISTRIBUCIÓN fuera de los EE. UU. Verifique la situación regulatoria del dispositivo en regiones donde el marcado CE no sea la regulación vigente.

1. Hoffman, J., & Kaplan, S., (2002). The incidence of congenital heart disease.
Journal of the American College of Cardiology, 39(12), 1890-1900.
2. Ocluser de CIV Muscular Amplatzer Instrucciones de Uso.

Precaución: Este producto está indicado para ser usado por o bajo la dirección de un médico. Antes de usarlo, consulte las Instrucciones de Uso, dentro de la caja del producto (si está disponible) o en eifu.abbottvascular.com o en medical.abbott/manuals para obtener información más detallada sobre Indicaciones, Contraindicaciones, Advertencias, Precauciones y Eventos Adversos.

La información contenida en este documento es **SOLO para DISTRIBUCIÓN fuera de los EE. UU.** Verifique la situación regulatoria del dispositivo en regiones donde el marcado CE no sea la regulación vigente.

St. Jude Medical is now Abbott.

Abbott Vascular International BVBA

Park Lane, Culliganlaan 2b, 1831 Diegem, Bélgica, Tel: +32 2 714 14 11
www.Cardiovascular.Abbott

™ Indica una marca registrada del grupo de empresas de Abbott.

‡ Indica la marca registrada de un tercero, que pertenece a su respectivo propietario.

© 2019 Abbott. Todos los derechos reservados.

33127-SJM-AMPL-0316-0089(1)e | La información contenida aquí es únicamente para su distribución fuera de los Estados Unidos, México y Brasil.

SL-16005-05 05/2019

NL-16015-05 05/2019

