

AMPLATZER™ Muscular VSD Occluders
Tratamiento estructural del corazón



ST. JUDE MEDICAL™
MORE CONTROL. LESS RISK.

LA RESPUESTA INNOVADORA
PARA EL CIERRE DE
LAS COMUNICACIONES
INTERVENTRICULARES
MUSCULARES

El AMPLATZER Muscular VSD Occluder y el P.I. Muscular VSD Occluder son dispositivos auto expandibles, de doble disco y fabricados con una malla de Nitinol. Los dos discos de estos dispositivos están unidos por una cintura que corresponde al tamaño de la Comunicación Inter Ventricular (CIV).

Comunicación Inter Ventricular

Las comunicaciones interventriculares constituyen el defecto cardíaco congénito más prevalente.¹ Un tipo de estos defectos es la comunicación interventricular muscular. Si no se trata, puede dar lugar a hipertensión pulmonar y/o insuficiencia cardíaca congestiva.² El AMPLATZER Muscular VSD Occluder y el P.I. Muscular VSD Occluder han sido diseñados para cerrar este tipo de defectos.

DISEÑADO PARA UN CIERRE COMPLETO

Cintura del dispositivo: Centra y llena el defecto

Material de poliéster: Fomenta la oclusión y el crecimiento del tejido

FLEXIBILIDAD PROCEDIMENTAL

Diseño simétrico: Permite un planteamiento de liberación femoral o arterial

Colocación exacta: Gracias a la posibilidad de recapturar o reposicionar el dispositivo en caso necesario

Diseñado especialmente para el cierre de CIV musculares

Algunas personas nacen con comunicaciones interventriculares complejas y padecen los efectos secundarios de esta afección, tales como cortocircuito de izquierda a derecha, hipertensión pulmonar y/o síntomas clínicos de insuficiencia cardíaca congestiva. El AMPLATZER Muscular VSD Occluder tiene como fin el cierre de estas comunicaciones interventriculares complejas en pacientes considerados de alto riesgo de cara a una reparación quirúrgica estándar.

Longitud de cintura de 7 mm


- AMPLATZER Muscular VSD Occluder ha sido desarrollado para adaptarse al grosor del tabique ventricular muscular

Específicamente diseñado para pacientes que han padecido infarto de miocardio

Algunos pacientes padecen una CIV aguda causada por la rotura de un tabique a causa de un infarto de miocardio.

Longitud de cintura 10 mm

- AMPLATZER P.I. Muscular VSD Occluder ha sido diseñado para adaptarse al tejido muscular dañado del tabique de los pacientes de que han padecido infarto de miocardio

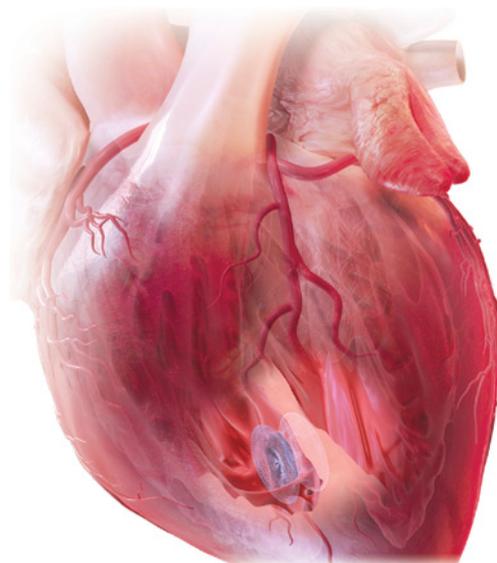

Cierre de una Comunicación Inter Ventricular muscular con el AMPLATZER Muscular VSD Occluder.

Información para pedidos

AMPLATZER Muscular VSD Occluder

| Modelo / Número de pedido | Diámetro de talla / tamaño de dispositivo (mm) | Longitud de cintura (mm) |
|---------------------------|--|--------------------------|
| 9-VSD-MUSC-004 | 4 | 7 |
| 9-VSD-MUSC-006 | 6 | 7 |
| 9-VSD-MUSC-008 | 8 | 7 |
| 9-VSD-MUSC-010 | 10 | 7 |
| 9-VSD-MUSC-012 | 12 | 7 |
| 9-VSD-MUSC-014 | 14 | 7 |
| 9-VSD-MUSC-016 | 16 | 7 |
| 9-VSD-MUSC-018 | 18 | 7 |

AMPLATZER P.I. Muscular VSD Occluder

| Modelo / Número de pedido | Diámetro de talla / tamaño de dispositivo (mm) | Longitud de cintura (mm) |
|---------------------------|--|--------------------------|
| 9-VSD-MUSC-PI-016 | 16 | 10 |
| 9-VSD-MUSC-PI-018 | 18 | 10 |
| 9-VSD-MUSC-PI-020 | 20 | 10 |
| 9-VSD-MUSC-PI-022 | 22 | 10 |
| 9-VSD-MUSC-PI-024 | 24 | 10 |

References

- Hoffman J, Kaplan S. The incidence of congenital heart disease. *JACC*. 2002;39(12):1890-1900.
- AMPLATZER Muscular VSD Occluder Instructions for Use.

ATRIAL FIBRILLATION CARDIAC RHYTHM MANAGEMENT CARDIOVASCULAR NEUROMODULATION

Global Headquarters

One St. Jude Medical Drive
St. Paul, Minnesota 55117
USA
+1 651 756 2000
+1 651 756 3301 Fax

Cardiovascular Division

177 East County Road B
St. Paul, Minnesota 55117
USA
+1 651 756 4470
+1 651 756 4466 Fax

Amplatzer Products

5050 Nathan Lane North
Plymouth, Minnesota 55442
USA
+1 763 513 9227
+1 763 513 9226 Fax

St. Jude Medical

Coordination Center BVBA
The Corporate Village
Avenue Da Vincilaan 11 Box F1
B-1935 Zaventem
Belgium
+32 2 774 68 11
+32 2 772 83 84 Fax

St. Jude Medical Japan Co., Ltd.

Shiodome City Center 15F
1-5-2, Higashi-Shinbashi
Minato-ku
Tokyo 105 7115
Japan
+81 3 6255 6370
+81 3 6255 6371 Fax

St. Jude Medical (Hong Kong) Ltd.

Suite 1608, 16/F Exchange Tower
33 Wang Chiu Road
Kowloon Bay, Kowloon
Hong Kong SAR
+852 2996 7688
+852 2956 0622 Fax

St. Jude Medical Brasil Ltda.

Rua Itapeva, 538
5º ao 8º andar
01332-000 - São Paulo (SP)
Brazil
+55 11 5080 5400
+55 11 5080 5423 Fax

SJMprofessional.com



CORPMEDICAL CHILE LIMITADA

Representante exclusivo en Chile

La Concepción 191, of. 205, Providencia, Santiago.
Teléfono: +56224816820 / Celular: +56992359435
Email: corpmedical@corpmedical.cl
www.corpmedical.cl / www.grupocorpmedicalchile.com



ST. JUDE MEDICAL™

MORE CONTROL. LESS RISK.

El producto al que se refiere este documento está aprobado para el mercado CE. El AMPLATZER P.I. Muscular VSD Occluder no está disponible en U.S. Dispositivo no disponible en todos los países. Contacte con su representante de St. Jude Medical para verificar la disponibilidad en su país.

Breve resumen: Lea las Instrucciones de uso antes de utilizar estos dispositivos, para ver una lista completa de indicaciones, contraindicaciones, advertencias, precauciones, posibles efectos adversos y modo de empleo.

AMPLATZER, ST. JUDE MEDICAL, el símbolo de los nueve cuadrados y MORE CONTROL. LESS RISK. son marcas comerciales de St. Jude Medical, Inc. y sus compañías relacionadas. ©2012 St. Jude Medical, Inc. Reservados todos los derechos.

MM00873 (01) ES Intl 03/12 IPN 1974-12