




LoopMaster[®] - Sochman Snare



- Lazo 3D de nitinol para la eliminación de cuerpos extraños sin extremo abierto
- Elevada fuerza de empuje y estabilidad de giro 1:1
- Máxima seguridad de producto

LoopMaster® - Sochman Snare

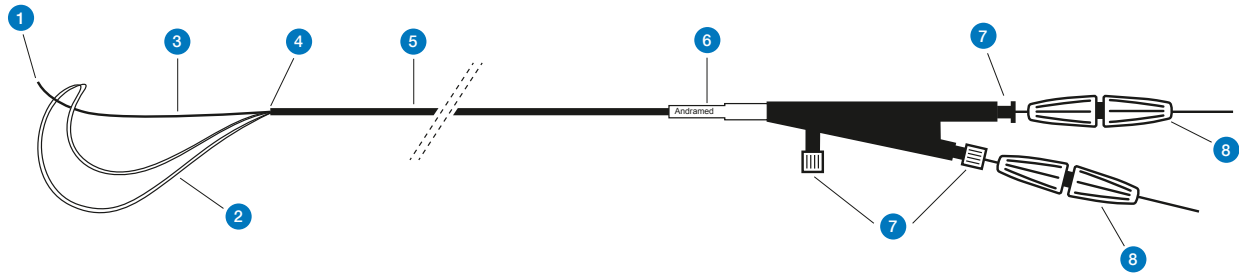


- 1 Alambre de seguridad con extremo distal atraumático
- 2 Lazo de nitinol
- 3 Alambre de seguridad
- 4 Marcadores radiopacos en el extremo distal del catéter
- 5 Vaina flexible
- 6 Protección contra doblamiento reforzada
- 7 Conexión con cierre Luer
- 8 Dispositivo de torsión más grande que permite controlar más fácilmente el lazo y el alambre de seguridad


Eliminación de cuerpos extraños



- 1 Abra el lazo y colóquelo alrededor del cuerpo extraño que debe ser eliminado.

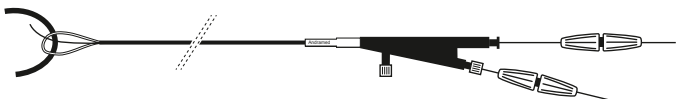

- 2 Cerrando el lazo, el cuerpo extraño queda fijado entre el lazo y el alambre de seguridad.

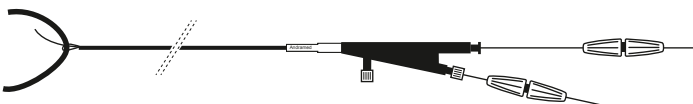

- 3 Completamente fijado, es posible eliminar el cuerpo extraño de manera segura.

Denominación del artículo LoopMaster®

Número de artículo	Ø de lazo	Longitud (cm) lazo/alambre guía	Longitud (cm) de del introductor	Ø del introductor (F)
ASL-25	25 mm	130/150	110	8

